



SafetySpot

SOLUTION POUR LA DÉSINFECTION DES SALLES ET DES SURFACES

Prévention quotidienne pour une sécurité
totale contre les infections dans les structures
ambulatoires dentaires et médicales

Toujours opérationnel contre les risques du quotidien

SafetySpot est très simple d'utilisation, en effet l'opérateur équipé de protections spéciales (masque + lunettes de protection ou visière) doit vaporiser le liquide désinfectant dans la salle et sur les surfaces.



Réduction ou élimination des agents pathogènes biologiques introduits dans le cabinet par les patients et les opérateurs

Traitement de environnements et surfaces même entre un patient et l'autre

En mesure d'atteindre également les endroits difficiles d'accès



L'importance d'un environnement sain

La crise du COVID19 a mis en évidence l'importance des moyens et des procédures préventives à mettre en place, mais surtout a sensibilisé tous les professionnels de santé sur un aspect jusqu'ici peu considéré, celui de la désinfection approfondie des différentes surfaces et matériaux présents dans les salles de soins et des cabinets.

Depuis de nombreuses années, Tecno-Gaz commercialise le SterilAir Pro, un système de traitement biologique de l'air en continu, et complète sa gamme de désinfection et *sécurité ambiante* avec SafetySpot, un système qui permet à toute structure ambulatoire de pouvoir **désinfecter toutes les salles de façon autonome** et en un temps record. Avec ce nouveau produit, Tecno-Gaz change le concept de désinfection des salles de soins, réalisé jusqu'à aujourd'hui manuellement, ou par des systèmes statiques qui peuvent créer des zones d'ombre, non traitées, et avec des temps de contacts extrêmement élevés.



Dans les différents espaces du cabinet

- Entrée et salle d'attente sont les points d'accès de nombreuses agents pathogènes
- Le traitement fréquent et rapide limite la prolifération des bactéries et arrête ou empêche leur transit vers les zones de soins
- De nombreux équipements et agencements ne sont pas pensés pour une facile désinfection rapide et facile, et la micro-nébulisation est l'idéal pour répondre aux nombreuses exigences



Dans les salles de soins

- Tissus et bactéries présents dans l'air, générés par les aérosols des instruments, et autres différentes sources, sont potentiellement infectés
- La dispersion dans l'air et sur les surfaces de ces résidus à haut risque peut se localiser et proliférer dans des recoins isolés et cachés, ou plus simplement sur des surfaces d'usage fréquent, exposant le personnel soignant et les patients à des risques infectieux
- Des systèmes de désinfection fixes offrent de bons résultats, mais présente des "cônes d'ombre", présentant le risque de ne pas traiter des zones critiques des zones opérationnelles



A la fermeture et la réouverture

- Une bonne approche, surtout face à l'urgence générée par le COVID 19, est celle de réaliser une désinfection approfondie à la réouverture
- La même activité est conseillée après tout arrêt prolongé
- L'alternative plus économique aux sociétés spécialisées dans la désinfection, à l'efficacité démontrée, est de procéder à cette désinfection minutieuse de façon autonome

Idéal en combinaison avec



SterilAir Pro

Orma

Idéal combiné avec



SterilAir Pro

Smart-Trolley Post-operationelle

Le nouveau dispositif SafetySpot



Ce nouveau système a été étudié pour un usage aisé par toute personne. Idéal pour toute type de salle, son objectif est de rendre chaque opérateur autonome pour la réalisation des tâches de désinfection des salles, en évoluant en toute sécurité. Désinfectez dès à présent votre cabinet, sans intervention externe, et répétez autant que nécessaire.



Avec les systèmes à nébulisation fixe, certaines zones ne sont pas atteintes par les aérosols.



Avec le Safety Spot, nous pouvons pulvériser le liquide désinfectant sur tous les zones du cabinet e et dans tous les recoins.

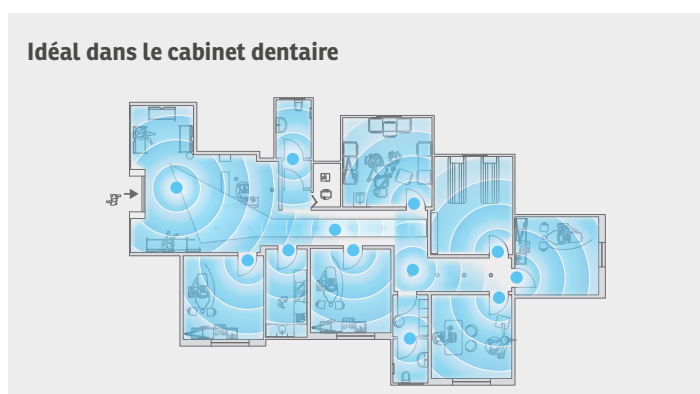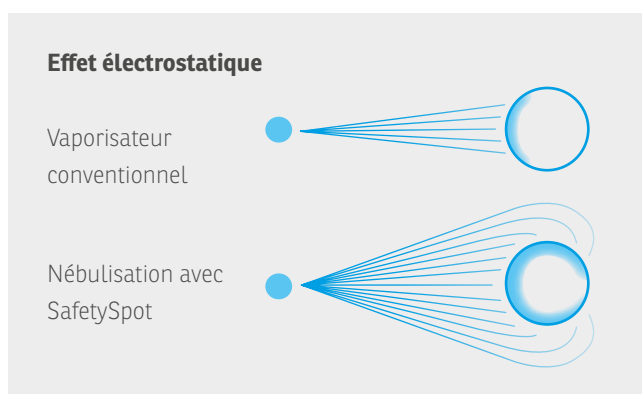

Idéal pour le traitement entre deux patients

SafetySpot est un nébuliseur d'aérosols qui génère des micro-particules très fines, en mesure d'assurer une diffusion parfaite dans tous les recoins de la salle. Le dispositif est léger, aisé à manœuvrer et facile à utiliser. Composé d'un groupe de ventilateurs électriques évolués, de grande puissance, et de trois injecteurs calibrés, il est en mesure de nébuliser le détergent concentré en un temps extrêmement rapide, même pour les salles de grande dimension. Grâce à sa valve de dosage sophistiqué, SafetySpot est en mesure de produire une nébulisation de diverses densités, et d'atteindre des distances de 5 à 7 mètres.

Les avantages



Portabilité maximale pour désinfection optimale de tout environnement et surface

Groupe de électroventilation

avec buses calibrées pour pulvérisation de détergents spéciaux.

Simple et pratique

L'utilisation de SafetySpot est très simple et le jet de pulvérisation a une longueur d'environ 2 mètres. La circulation forcée de l'air est assurée par des ventilateurs silencieux spéciaux.

Réservoir de 5 litres

Pour travailler efficacement sans interruption.

Une efficacité maximale reconnue

grâce à l'utilisation d'un liquide détergent spécial



Pourquoi SafetySpot

Désinfection de l'environnement et des surfaces

SafetySpot est un système pour la désinfection des salles et des surfaces et il se combine parfaitement avec SterilAir PRO afin d'assurer une sécurité bactériologique dynamique et rapide, sans comparaison.


15 minutes

temps de traitement

Dimensions en comparaison



cheveux humains

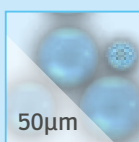

aérosol



Micro spray
SafetySpot

À la différence d'autres systèmes, SafetySpot poursuit l'objectif de répondre aux différents problèmes auxquelles le dentiste est confronté quotidiennement.

Avec ce dispositif en utilisant le liquide adapté est conseillé le dentiste entre chaque patient est en mesure de désinfecter la salle de soins en moins de 15 minutes (traitement et temps de contact inclus), et de réutiliser la salle et les équipements rapidement et en toute sécurité.

Souhaitez vous soigner la salle d'attente et les autres environnements de travail pendant la journée pour vous assurer un environnement sûr? Vous pouvez le faire rapidement. Aucun autre système ne peut vous garantir une mise en sécurité si rapide.



Détergent désinfectant

L'importance d'un système complet

SafetySpot est un système composé d'un dispositif de nébulisation et d'un liquide adapté. Le liquide est un détergent désinfectant basé sur la technologie triammine. Il ne contient pas d'alcool ni d'ammonium quaternaire.



10 litres /1%-2%

Liquide concentré est fourni en bidons de 10 litres et doit être dilué de 1% à 2% Le temps de contact est seulement de 10 à 15 minutes.



**DISPOSITIF
CHIRURGICAL
MÉDICAL**



Activité à spectre large.

Efficace pour détruire de nombreux agents pathogènes.



Détergent désinfectant aux prestations élevées

avec des résultats microbicides excellents, et efficace contre les micro-organismes qui provoque la tuberculose.



Efficacité testée

Conseillé pour de multiples utilisations, idéal pour les cabinets dentaires, hôpitaux, et pour les structures ambulatoires, pour le traitement des surfaces, des sols et des équipements.



Avec SterilAir Pro, la sécurité maximale

Le **système de sécurité environnementale Tecno-Gaz** est le modèle le plus sûr. En effet, avec SafetySpot nous pouvons réaliser une activité de traitement biologique environnemental et de toutes les surfaces, tandis que SterilAir PRO met en œuvre un traitement biologique continu avec une réduction de 99,99% des pathogènes, pendant toutes les activités de traitement dentaire.




360°

Prévention quotidienne pour une sécurité maximale contre les infections en milieu dentaire

SafetySpot

SOLUTION POUR LA DÉSINFECTION DES SALLES ET DES SURFACES

Prévention quotidienne pour une sécurité totale contre les infections dans les structures ambulatoires dentaires et médicales

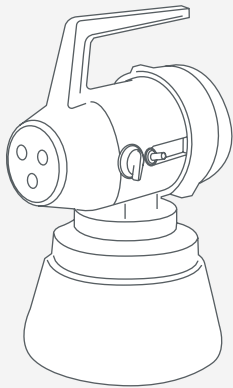

Art. **3ELNI0001**

**DISPOSITIF
NEBULISATEUR
SafetySpot**

Art. **3LIQM0001**

**DÉTERGENT
DÉSINFECTANT**

Détergent spécifique
en dilution 1% -2%,
bidon de 10 litres

Dimensions (LxPxH)

290 x 260 x 430 mm

Poids

3,5 kg

Réservoir

5 litres

Puissance max

30 litres/heure

Diamètre particules

de 20 à 60 µ

Puissance

1000 Watt

Moteur

200V - 18000 rpm

Absorption

4,5 Ah



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy

Ph. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tous droits réservés Tecno- Gaz S.p.A. Les changements d'images ou de contenu peuvent être effectués sans préavis. Tecno-Gaz S.p.A. n'est pas responsable des dommages résultant d'une information incorrecte ou incomplète rapportée dans ce document. Les images utilisées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif.



Tecno-Gaz Spa.

www.tecnogaz.com

