

TECNO-GAZ

news

OCTOBRE 2019
Numéro 12

Infos et opportunités en direct du
fabricant à l'utilisateur

Venez célébrer nos

1979-2019

ANS

avec nous!

Dans cette édition vous trouverez de
nombreux nouveaux produits et des offres
attractives sur toute la gamme de produits
Tecno-Gaz

NOUVEAUTÉS STÉRILISATION

PRO	PRIX SUR DEMANDE	AQUA PLUS	Scan
		7.75	5.890
		166	

PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
27 - 30 Nov. 2019
Porte Maillot

Stand 2L31

CONGRÈS
ADF
2019

Cycle Fast de stérilisation

INSTALLEZ LE PROTOCOLE LE PLUS RAPIDE DE LA STÉRILISATION

Avec le système de stérilisation intégré, Tecno-Gaz réduit les temps et les coûts de stérilisation, obtenant ainsi la qualité certifiée maximale.



20'
CYCLE
COMPLET

TECHNOLOGIE
ROTATIVE
RÉVOLUTIONNAIRE



Préparation de
la stérilisation

standby

ultrasons

vidange

séchage

1

Cuve multifonctionnelle automatique Multisteril Fast

Grâce au nouveau Multisteril Fast, le processus de stérilisation est possible en réalisant toutes les phases en seulement 20 minutes.

-20MIN.

qu'un cycle traditionnel

2

Soudeuse à défilement Tecnoseal

Rapidité, préparation des instruments emballés en seulement 10 minutes.



TecnoEasy



TecnoSupport

-10MIN.

qu'un cycle traditionnel

Stérilisation
automati-
ques

7 cycles

Système
de contrôle
PID

Système de
préchauffage
PHD

SD card assure
l'enregistrement
des cycles

Un
raccordement au
système osmose

3

Autoclave Onyx 5.0

Grâce au nouveau Multisteril Fast, le processus de stérilisation est possible en réalisant toutes les phases en seulement 20 minutes.



-10MIN.

qu'un cycle traditionnel

Total -40 min

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019

CYCLE DE STÉRILISATION

ONYX 5+
MULTISTERIL FAST +
TECNOSEAL + SYSTÈME
OSMOSE PURA GRATUIT

Prix standard
~~12.190€~~
8.550€ TTC

ONYX 7+
MULTISTERIL FAST +
TECNOSEAL + SYSTÈME
OSMOSE PURA GRATUIT

Prix standard
~~12.690€~~
8.950€ TTC

Validité jusqu'au 31/12/2019

▶ IRIS

l'autoclave révolutionnaire dernière génération.



Encombrement réduit

Seulement 58 cm de profondeur avec une chambre de 18 litres ou de 24 litres. Aération latérale qui permet de l'installer "contre le mur" sans nécessité d'espaces d'aération à l'arrière.

Connectivité totale, système IoT

Système d'enregistrement interne, stockage de données téléchargeables sur clé USB ou consultables par réseau (IoT) Connectivité optimale avec les systèmes Wifi, Bluetooth et Ethernet Intégration à des logiciels de contrôle et de traçabilité des dispositifs de stérilisation Diagnostic et contrôle à distance.

Filtration de l'eau intégrée

Système de filtrage qui permet de faire 100 cycles environ sans remplacer l'eau introduite dans le réservoir. Grâce au double système de filtrage intégré, la consommation est inférieure à 0,1 litre par cycle.

Prévu pour se raccorder au système de déminéralisation automatique Pura Plus.

▶ AQUA PLUS

Termo-désinfecteur

AQUA Plus remplit les fonctions de lavage et de désinfection thermique des instruments, éliminant la charge bactérienne et protégeant les opérateurs qui devront les manipuler dans les phases ultérieures du processus de stérilisation.

- Panier standard
- Panier pour petits plateaux
- Barre de lavage pour 9 pièces à main
- Panier pour miroirs et instruments
- Position horizontale
- Accessoire pour lavage inserts

Séchage thermodynamique d'une très grande efficacité grâce à un flux d'air chaud dans les bras de lavage, et une solution unique de séchage dans la rampe d'instruments rotatifs permettant un séchage interne des pièces à main.



OFFRE SPÉCIALE ADF 2019
+ NOUVEAUTÉS STÉRILISATION

Validité jusqu'au 31/12/2019

IRIS

**PRIX SUR
DEMANDE**



AQUA PLUS



7.750 €^{TTC}

AQUA PLUS ENCASTRÉ



8.450 €^{TTC}

SOLUTION SALLE DE CHIRURGIE INTÉGRÉE NIVEAU D'ENTRÉE

"MA PREMIÈRE SALLE DE CHIRURGIE"

L'objectif de "Ma première salle chirurgicale Tecno-Gaz" est de permettre aux chirurgiens implantologues qui s'installent, ou qui mettent en place pour la première fois une salle chirurgicale dédiée, d'évoluer dans les meilleures conditions ergonomiques. Le budget contenu pour cette première installation facilitera également l'installation d'équipements neufs, améliorant nettement l'image du cabinet transmise au patient et sa confiance.

Fauteuil Tygi

Le fauteuil TYGI, économique et esthétique, est accessible à 360°, sans crachoir et bloc hydrique, facilite la mise en place d'une table pont, mettant à disposition du docteur et de son assistante un large plateau pour positionner les instruments et autres éléments utilisés de façon ordonnée.



Ergo-Seat

Le siège opérateur orthopédique Ergo-Seat, au retour lombaire dynamique, stimule la position active de la colonne, et l'angle 105° dos/bassin/jambes optimal afin de répartir efficacement le poids pour un confort durable pendant toute la durée de l'acte.

Kyri bridge

La table pont Kyri bridge, avec son plateau juste posé sur le cadre, facilite le nettoyage et l'hygiène évitant tout nid à bactéries.

Kyri DSS

L'aspirateur chirurgical Kyri DSS, mobile et autonome, met à disposition ses caractéristiques performantes pour assurer l'aspiration précise des tissus et fragments.

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019



PREMIÈRE SALLE DE CHIRURGIE

TYGI avec PÉDALE FILAIRE PC001TYG + LAMPE SLIM
100.000LUX 370S2 + KYRI BRIDGE 1498E +
ERGOSEAT SD99SED+ SDXXXSED +
STERILAIR PRO GRATUIT SA210ZSA

Prix standard

15.240€

10.500€^{TTC}

Validité jusqu'au 31/12/2019

SLIM


Le scialytique chirurgical Slim, d'une puissance de 100.000 Lux, délivre l'intensité nécessaire pour une vision nette et précise. Les 12 leds en illumination indirecte assureront une bonne maîtrise des ombres portées.

SOLUTION SALLE DE CHIRURGIE INTEGRÉE PROFESSIONNELLE

Fauteuil Kyri

Une modularité qui vous permet de configurer et faire évoluer votre structure selon vos besoins.

Kyri est le seul fauteuil chirurgical étudié et conçu spécifiquement pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité opérationnelle en chirurgie dentaire. Les 5 mouvements indépendants sont rendus possibles grâce aux 4 motorisations, permettant d'atteindre toutes les positions possibles, facilitant le travail de l'opérateur et augmentant le confort du patient. Il est possible d'ajouter une tablette d'aspiration avec canules, et de fixer sur les rails latéraux de nombreux accessoires tels que les accoudoirs, des perches à solution physiologique ou un support d'appui pour la technique PRF.

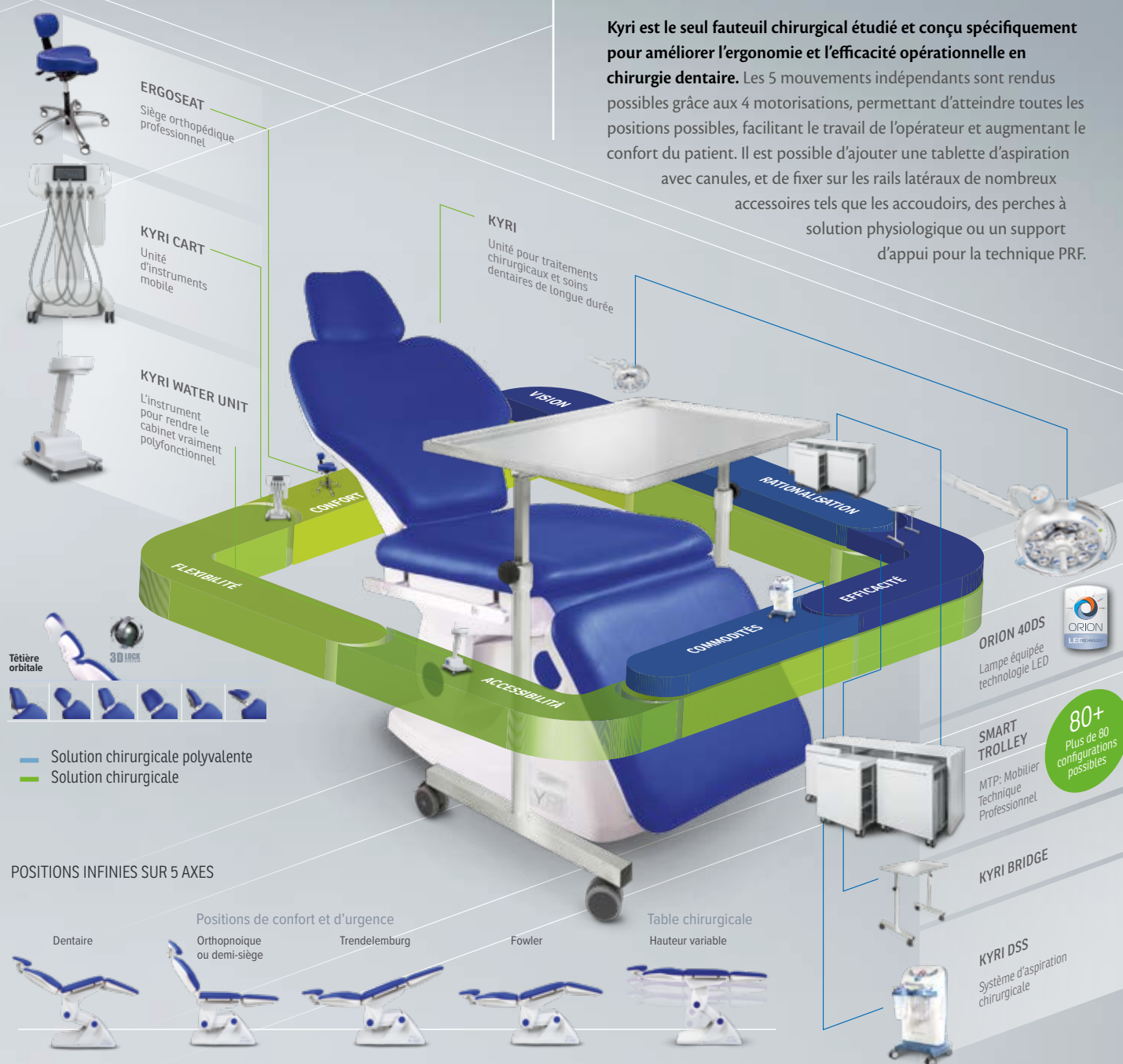

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019

SALES DE CHIRURGIE

Validité jusqu'au 31/12/2019

PROFESSIONNELLE

KYRI avec PEDALE SANS FIL +
ORION 40DS Plafond + KYRI
BRIDGE + KYRI DSS + ERGSEAT
+ TECNO HEART gratuit

Prix standard 24.720€
17.500€ TTC

POLYVALENTE

KYRI avec PEDALE SANS FIL +
ORION 40DS Plafond + KYRI CART +
KYRI BRIDGE + KYRI DSS +
ERGSEAT + LAVABO TECNO SINK
gratuit

Prix standard 40.560€
28.000€ TTC

ERGONOMIQUE

KYRI avec PEDALE SANS FIL +
ORION 40DS Plafond + KYRI CART +
KYRI BRIDGE + KYRI DSS +
ERGSEAT + 3 SMART TROLLEY +
GARAGE

Prix standard 47.520€
30.000€ TTC



Orion40DS Il vous offre la bonne lumière

► Orion 40DS. Protégez votre vue.

» Éclairage parabolique indirect

Intensité lumineuse jusqu'à:

130.000 Lux

Température couleur:

4.500/5.000 K

Champ lumineux:

15 cm et 20 cm



Spécifique pour l'utilisation dentaire

Orion 40DS est la première lampe scialytique spécialement conçue pour un usage dentaire grâce à l'étude des contraintes et des exigences liées à la chirurgie dentaire. Champs éclairés de 15 cm et 20 cm permettant d'illuminer toutes les positions d'une bouche angulée jusqu'à 45°. Intensité lumineuse calibrée à 56000 lux en usage dentaire. Double température de couleurs de 4500° et 5000° K pour distinguer les tissus durs des tissus mous. Orion 40DS concentre toutes les caractéristiques et spécifications adaptées à la chirurgie buccale.



Double plage d'éclairage

Les plages d'intensité lumineuse de la Lampe Orion 40DS change selon les besoins de l'opérateur:

- Fonction E-Dental Light: de 20.000 Lux à 55.000 Lux avec fonction de General Practice Lamp
- Fonction ORION Light: de 40.000 Lux à 130.000 Lux avec fonction de Lampe Chirurgicale




Cette fonction permet de seulement allumer deux modules de 6 LEDs, générant un champ illuminé de 15 cm avec une intensité lumineuse maximum calibrée à 56000 Lux.




Lumière froide

L'augmentation du rayonnement thermique sur le champ opératoire est proportionnelle à la quantité et à la puissance des LED utilisées. Grâce à son concept de lumière indirecte, Tecno-Gaz utilise un nombre réduit de LED, l'émission de chaleur est extrêmement faible.


Configurations possibles

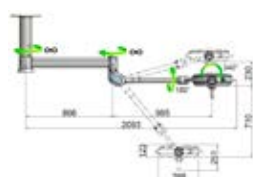

Plafond
Art. LC102LRD

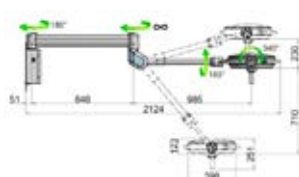

Mur
Art. LC001LRD

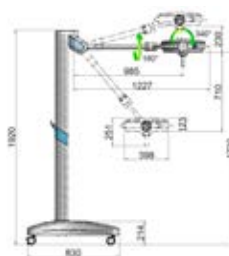

Statif
Art. LC103LRD



Plafond avec caméra
Art. LC106LRD

► Orion Tech. Éclairage chirurgical.

Intensité lumineuse jusqu'à:

160.000 Lux

Température couleur:

4.500/5.000 K

Champ lumineux:

Champ rectangulaire 20 x 12 cm:

intensité de 0 à 60.000 lux à 70 cm de distance

Champ circulaire de 27 cm:

intensité de 40.000 à 60.000 lux à 100 cm de distance



Orion Tech est une évolution du très réputé scialytique Orion 40DS, dédié aux besoins cliniques du chirurgien dentiste implantologue.

Orion Tech est lampe chirurgicale spécifiquement développée pour l'usage dentaire, grâce à des caractéristiques calibrées selon les besoins du dentiste: A une distance de 70 cm, le champ éclairé rectangulaire de 20 x 12 cm propose une intensité lumineuse de 0 à 60.000 lux et une double température de couleur de 4.500 et 5.000° K. Orion Tech est une lampe multifonctionnelle qui permet de varier les tailles de champs, donnant la possibilité par simple click de passer du champ dentaire (20 x 12) au champ chirurgical (27 cm circulaire). Le champ chirurgical propose également deux températures de couleurs de 4.500° et 5.000° K, et une intensité lumineuse qui variable de 40.000 à 130.000 lux.


Système anti oscillation et Double fourche

Orion Tech propose une qualité de positionnement unique, grâce à un bras très solide qui garantit le maintien du positionnement et évite toute oscillation une fois la position choisie et arrêtée. La maniabilité de Orion Tech, unique et commode avec la version simple fourche, devient encore plus confortable et sans contrainte avec le système unique de double fourche, permettant une préhension aisée par tous les intervenants, que l'on travaille à 4 ou à 6 mains.

Illumination indirecte brevetée

Orion Tech intègre la technique brevetée d'illumination indirecte. 30 leds inversées illuminent 30 coupoles individuelles qui maximisent l'effet scialytique, assurant une parfaite maîtrise des ombres portées et garantissent une incroyable illumination en fond de bouche malgré la présence des instruments. Cette technique unique permet également de travailler debout, sous la lampe, tout en illuminant la cavité orale.

Éclairage parabolique indirect

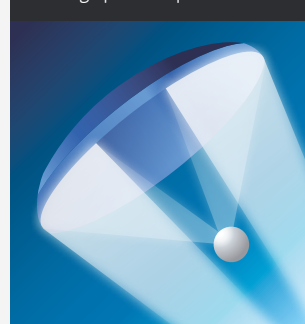

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019

ECLAIRAGE CHIRURGICAL



Orion 40DS

5.300 €^{TTC}



Orion Tech

6.400 €^{TTC}

Validité jusqu'au 31/12/2019

► TYGI. Vos exigences avant tout.



Écran tactile résistif 7" couleur avec port USB. Utilisable sans aucun problème avec des gants

Struttura **100%**
PFL
Plastic Free Logic

La logique qui nous a guidés dans le développement des lignes TYGI, part du concept que l'unit est l'élément central des activités du cabinet, sur lequel on entreprend toutes les activités dentaires, qui exigent une bonne adaptabilité opérationnelle et un équipement indispensable. C'est pourquoi l'équipement standard de nos modèles comprend toujours:

- une lampe LED étanche avec allumage et système de réglage « no touch »
- un fauteuil avec 24 mémoires
- un fauteuil avec système anti-déshabillage
- un accoudoir du côté gauche
- des systèmes de désinfection
- un appui-tête 3D Lock
- un grand écran, avec un menu riche simple et intuitif

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019



FAUTEUIL DENTAIRE

Validité jusqu'au 31/12/2019

TYGI 300 B RD601TYG

Configurations: 4 cordons, seringue 3F, turbine, micro-moteur, ultrasons Satelec Newtron. Système de désinfection compris.

Siège opérateur
Ergo-Seat offert



20.900€^{TTC}

TYGI 300^{evo}_L

Fauteuil avec système "Anti-Undress" pour prévenir le déshabillage du patient

Lampe opératoire étanche à l'eau Xenos Led (8.000/30.000 lux) avec température de couleur (5.500°K) et joint à rotule. Allumage et réglage "no touch"

24 mémoires programmables avec possibilité de réglages personnalisés pour quatre utilisateurs

Struttura 100%
PFL
Plastic Free Logic

Large plage de fonctionnement d'une hauteur minimale de 39 cm pour installer les enfants et les personnes âgées, à un maximum de 79 cm pour travailler constamment avec le patient dans la bonne position

Le patient doit être accueilli dans la zone opératoire sans générer de stress ou de tensions, et il est nécessaire de lui offrir autant que possible un impact visuel agréable pour l'aider à surmonter les peurs ancestrales liées à l'intervention dentaire.

Grâce à l'extrême précision et à la qualité des matériaux TYGI 300 evo offre : des lignes épurées, une hygiène totale, une coplanarité optimale des surfaces grâce à la réduction des fissures. Le design raffiné et les lignes douces du bras pantographe de l'unité dentiste et du support de lampe, affinent l'équipement en lui donnant une touche d'élégance.

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019




FAUTEUIL DENTAIRE *LIFT*

TYGI 300 L RD601TYG

Configurations: 4 cordons, seringue 3F, turbine, micro-moteur, ultrasons Satelec Newtron. Système de désinfection compris

Siège opérateur
Ergo-Seat offert

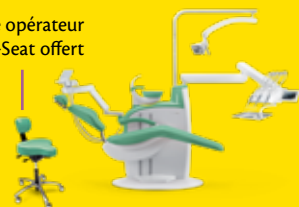

21.500€^{TTC}

Validité jusqu'au 31/12/2019

Le Workflow Digital

DEVIENT RÉALITÉ DANS LES CABINETS DENTAIRES

1



2



TecnoScan

Tecno Scan est un scanner multifonctions qui permet de numériser le porte-empreintes ainsi que les modèles orthodontiques, garantissant un classement simple et pratique, évitant le stockage encombrant des empreintes.

ExoCad

EXOCAD est réputé pour sa rapidité et sa simplicité d'utilisation, il vous aide ainsi à réduire au minimum les coûts de formation et à maximiser la productivité. Il est fiable et efficace dans les cas complexes comme dans les cas usuels. La vitesse et la flexibilité du logiciel ExoCad DentalCAD ont été obtenues par les derniers résultats de la recherche dans la modélisation des prothèses. Pendant plus de sept ans, notre équipe d'ingénieurs n'a cessé d'innover pour un marché en plein essor. Nous sommes à l'écoute de nos clients et continuons à intégrer les dernières évolutions afin de garantir aux utilisateurs Exocad d'avoir une longueur d'avance.

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019



DIGITAL WORKFLOW

TecnoScan

PC offert

11.460€^{TTC}

Validité jusqu'au 31/12/2019

Quantum

Usineuse chairside. Conçue pour la dentisterie.

La ligne Quantum a été créée pour être un dispositif à usage dentaire, mais son concept de construction est de type industriel, ceci pour assurer précision, stabilité, production élevée et durée de vie maximale.

new

3



QUANTUM est disponible en 3 versions:

- Caractéristiques communes:
- 5 axes
- Sec et humide
- 11 outils
- Changement d'outil automatique
- Contrôle de l'opération à distance

Quantum B

- Électro-broche Jäger 500 W.
- Moteurs stepper haute qualité
- Écran tactile 7" (en option)

Quantum N

- Moteurs brushless
- Électro-broche Jäger à induction 500 W
- Écran tactile 7"
- Changement d'outil électrique, aucun compresseur nécessaire (en option)

Quantum Z

- Écran tactile 7"
- Moteurs brushless
- Électro-broche Jäger extrêmement performante 750W, plus puissant aussi pour le fraisage pre-milled
- Changement outil électrique, aucun compresseur nécessaire
- Changement de blocs automatique dédié aux grands flux de travail

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019
QUANTUM

**PRIX SUR
DEMANDE**



Facile à utiliser grâce au
contrôle à distance



TecnoScan PRO

N'ayons pas peur des mots, le meilleur scanner du moment

Rapide et sûr, en tous points.

TecnoScan PRO inclut les dernières technologies afin d'obtenir un scan rapide, de haute résolution et d'une précision maximale. L'appareil est adapté aux gros volumes des laboratoires de production qui exigent la meilleure qualité possible des données et une précision extrême pour les structures multi-implantaires.



Précision
5µm



Sigma5

Usineuse de table à commande numérique avec 5 axes à interpolation continue

Usineuse d'entrée de gamme très performante.

- Peut traiter tous les métaux pré-sintérisés + les matériaux mous et silicates ainsi que les matériaux thermoplastiques.
- Matériaux mous tels que cire, PMMA, PEEK (polyétheréthercétone), résines, composites, oxyde de zirconium, aluminium, etc.
- Matériaux durs tels que céramiques, disilicate de lithium, etc.



Delta5

Usineuse de table à commande numérique avec 5 axes à interpolation continue opérant à sec et en milieu humide.

Précision et polyvalence

- Peut traiter tous les métaux + les matériaux mous et silicates ainsi que les matériaux thermoplastiques.
- Cire, PMMA, résines diverses, composite, oxyde de zirconium et oxyde d'aluminium, disilicate de lithium, titane (de grade 2 et de grade 5), alliage Cr-Co, etc.



OFFRE SPÉCIALE ADF 2019

DIGITAL WORKFLOW LAB



TecnoScan Pro

Cod. SC001TSP

PC offert

20.376€^{TTC}

Validité jusqu'au 31/12/2019



Sigma 5

PRIX SUR DEMANDE



Delta 5

PRIX SUR DEMANDE

Delta6

Usineuse de table à commande numérique avec 5 axes à interpolation continue opérant à sec et en milieu humide

Matériaux usinables: Cire, PMMA, résines diverses, composite, dioxyde de zirconium et oxyde d'aluminium pré-sintérisés, hydroxyapatite, titane (de grade 2 et de grade 5), alliage Cr-Co.

Electrobroche Jäger puissance maximum 3,1 kW de puissance maximum à 60.000 tours/min.

Contrôle par lignes optiques

- Lignes optiques (précision $\pm 1 \mu = 0,001 \text{ mm}$) sur les trois axes X, Y, Z et codeurs optiques absolus sur deux axes rotatifs (précision 0,00012 rad) pour garantir une précision durable.



Gamma5

Usineuse de table à commande numérique avec 5 axes à interpolation continue opérant à sec et en milieu humide. Qualité optimale pour les gros volumes

Gamma5 c'est la machine universelle spécifiquement conçue pour le secteur de la prothèse dentaire composé de nombreux laboratoires relativement petits. Elle peut usiner n'importe quel type d'élément dans n'importe quel matériau. Grâce à ses 5 axes en interpolation continue, elle peut produire des piliers personnalisés, faire des contre-dépouilles, apporter les meilleures finitions de surface et réduire les durées de finition à la main.

Broche Jäger d'une puissance maximale de 2,1 kW à 50 000 tours/minute

Fabriquée par une entreprise allemande leader du marché: garantie de la qualité, garantie des prestations et de durée dans le temps, pour fraiser de manière optimale à faible vitesse de rotation (ex. alliages chrome-cobalt et titane) ou à vitesse élevée (ex. céramique). Refroidissement par liquide avec une unité extérieure comprise.



OFFRE SPÉCIALE ADF 2019

DIGITAL WORKFLOW LAB



Delta 6

PRIX SUR DEMANDE



Gamma 5

PRIX SUR DEMANDE

► Premiers Secours

Une solution indispensable pour votre clinique

Dans chaque cabinet il est nécessaire de gérer la sécurité des patients à travers des moyens adaptés. Tecno-gaz propose un projet complet en mettant à disposition des dentistes tous les dispositifs nécessaires.

1

Surveillance
MD80 Plus
MONITEUR



2

Surveillance
Vital Test
PULSOXYMÈTRE



3

Défibrillation
Défibrillateur
Tecnoheart



4

Pas seulement des appareils, mais aussi un protocole opérationnel efficace et vital.

Dans tous les centres où des actes chirurgicaux invasifs sont pratiqués, il est impératif en cas d'urgence d'être équipé de dispositifs adaptés aux premiers soins du patient, afin de faire face à toute éventualité.

Mobile complet
E-POINT



*Proportion dimensionnelle des produits non respectés

OFFRE SPÉCIALE ADF 2019
+ **PREMIERS SECOURS**

Validité jusqu'au 31/12/2019



Tecnoheart PLUS
+ Boîtier mural

Prix standard

~~2.004€~~

1.700€ TTC

Tecnoheart PLUS
+ Vital test + Boîtier mural

Prix standard

~~2.490€~~

1.950€ TTC

E-Point + MD80
Monitor + Tecnoheart PLUS

Prix standard

~~7.050€~~

4.500€ TTC

OFFRES SPÉCIALES ADF 2019

1 Cycle de stérilisation

- Onyx 5
- Multisteril Fast
- Tecnoseal
- **Système osmose Pura Gratuit**



TTC
€
8.550

2 Cycle de stérilisation

- Onyx 7
- Multisteril Fast
- Tecnoseal
- **Système osmose Pura Gratuit**



TTC
€
8.950

3 Cycle de stérilisation

- Aqua Plus



TTC
€
7.750

4 Cycle de stérilisation

- Aqua Plus Encastré



TTC
€
8.450

5 Salle de chirurgie

- Tygi avec pédale filaire
- Lampe Slim
- Kyri Bridge
- Ergoseat
- **Sterilair Pro Gratuit**



TTC
€
10.500

6 Salle de chirurgie Professionnelle

- Kyri avec pedale sans fil
- Orion 40DS plafond
- Kyri Bridge
- Kyri DSS
- Ergoseat
- **Tecno Heart Gratuit**



TTC
€
17.500

7 Salle de chirurgie Polyvalente

- Kyri avec pedale sans fil
- Orion 40DS plafond
- Kyri Cart
- Kyri Bridge
- Kyri DSS
- Ergoseat
- **Lavabo Tecno Sink Gratuit**



TTC
€
28.000

8 Salle de chirurgie Ergonomique

- Kyri avec pedale sans fil
- Orion 40DS plafond
- Kyri Cart
- Kyri Bridge
- Kyri DSS
- Ergoseat
- 3 Smart Trolley
- Garage



TTC
€
30.000

9 Fauteuil Dentaire

- TYGI 300 B
- Configurations: 3 INSTRUMENTS + DETARTREUR WOODPECKER AVEC POINTES EMS



TTC
€
17.640

10 Fauteuil Dentaire LIFT

- TYGI 300 L
- Configurations: 3 INSTRUMENTS + DETARTREUR WOODPECKER AVEC POINTES EMS



TTC
€
18.840

11 Éclairage chirurgical

- Orion 40DS



TTC
€
5.300

12 Éclairage chirurgical

- Orion Tech



TTC
€
6.400

13 Digital Workflow

- TecnoScan



TTC
€
11.460

14 Digital Workflow LAB


- TecnoScan PRO
- PC Offert



TTC
€
20.376

15 Digital Workflow

- Quantum

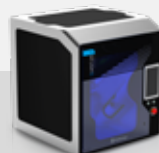

PRIX SUR DEMANDE

16 Digital Workflow LAB

- Sigma 5
- Delta 6
- Delta 5
- Gamma 5



17 Premiers Secours

- Tecnoheart PLUS
- Boitier mural



TTC
€
1.700

18 Premiers Secours

- Tecnoheart PLUS
- Vital test
- Boitier mural



TTC
€
1.950

19 Premiers Secours

- E-Point
- MD80 Monitor
- Tecnoheart PLUS



TTC
€
4.500



40 ANS D'HISTOIRE ET DE SUCCÈS ...

Suivre le rythme
du temps et
devenir un point de
référence pour des
milliers de cabinets
et de laboratoires
dentaires.

En 1979, je n'avais que 17 ans lorsque j'ai
commencé mon histoire professionnelle
avec la création de Tecno-Gaz, une
aventure extraordinaire toujours vécue avec
enthousiasme et passion, qualités qui ont
toujours caractérisées notre entreprise.

Personnellement, je ne suis pas nostalgique,
ma logique est de toujours regarder devant
moi et ne pas vivre dans les souvenirs. Le
passé a déjà donné, il faut donc préparer
l'avenir.

Mais le 40e anniversaire est quelque chose
de spécial car il marque la maturité d'une

entreprise qui a su se développer, suivre le
rythme du temps et devenir un point de
référence pour des milliers de cabinets et de
laboratoires dentaires.

Tout cela est arrivé grâce à vous qui nous
avez fait confiance et avez permis de faire
de TECNO GAZ S.p.A. une réalité italienne
connue dans le monde entier.

Paolo Bertozzi, President Tecno-Gaz

Rendez-vous à...

PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
27 - 30 Nov. 2019
Porte Maillot

Stand 2L31

CONGRÈS
ADF
2019



 **TECNO-GAZ**
industries

Tecno- Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy

Ph. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061



Tecno-Gaz Spa.

www.tecnogaz.com

