



ONYX 6

Kompakte Größe für starke Leistung

Kompakter Autoklav für Typ B-Beladung



Größe und Verbrauch minimieren



Im Laufe der Jahre hat Tecno-Gaz Produkte sowie Lösungen konzipiert und entwickelt, die den Bedürfnissen der zahnmedizinischen und medizinischen Fachleute entsprechen. Die neueste Ergänzung ist der ONXX 6, ein Autoklav mit einzigartigen Merkmalen und Eigenschaften, der die täglichen Anforderungen der Kliniken an die Sterilisation von Instrumenten erfüllt. Sein modernes Design ermöglicht die Anpassung an jede Art von Sterilisationsraum. ONXX 6, das neue Modell der ONXX-Reihe.



Zeitersparnis



Ladekapazität +20 %
im Vergleich gegenüber
herkömmlichen Tablethaltern.

Einfache Betriebseinstellungen



Neue Unterstützung bei dem
Türkalibrierungssystem. Einfache
und präzise Einstellungen
vornehmen.

Energieeinsparung



Das Vorheiz- und
Temperaturhaltungs-system
sorgt für kürzere Zykluszeiten und
geringeren Stromverbrauch.

Gesteigerte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit



Eine geballte Technik

Wie die gesamte ONYX-Baureihe verwendet auch der ONYX 6 qualitativ hochwertige Komponenten wie Thomas-Gardner-Denver-Vakuumpumpen und Parker-Magnetventile, die eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantieren.

ONYX 6.

Weniger Platz, gleichbleibende Sicherheit

Das Hauptmerkmal des ONYX 6 ist seine kompakte Größe. In der Tat hat der ONYX 6 eine Tiefe von nur 64 cm und kann dank seiner seitlichen Belüftungssysteme sehr nah an der Wand platziert werden, wodurch er sogar auf Standard 60 cm-tiefen Schränke gestellt werden kann.

Kompaktes Design vereinfacht die Unterbringung



640mm

497mm

600mm

Platzsparend. Der ONYX 6 hat eine Tiefe von nur 640 mm

Sein seitliches Belüftungssystem ermöglicht die Aufstellung des ONYX 6 nahe an der Wand.

Standardschrank

Türkalibrierung



Das neue Unterstützungssystem für die Türkalibrierung ermöglicht dem Bediener, Einstellungen einfacher und genauer vorzunehmen.


P.I.D. System



Der ONYX 6 ist mit einem innovativen PID System ausgestattet, das eine ständige Kontrolle über die Autoklavenparameter und automatische technische Eingriffe im Falle von einfachen Fehlern gewährleistet.

Kompakt, aber mit 20% mehr Ladekapazität dank des neuen 5-teiligen Tabletthalters

Der ONYX 6 wird mit einem runden Tabletthalter und fünf Tablettis geliefert. Dies erhöht die Ladekapazität um ca. 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Tabletthaltern.

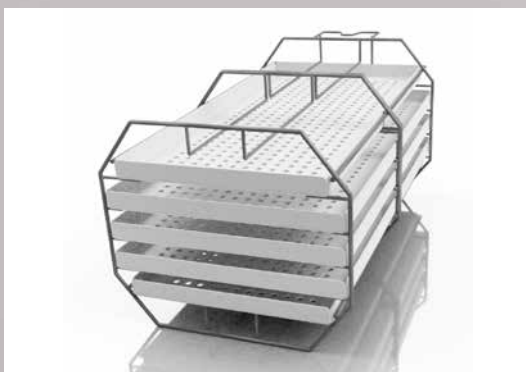

ONYX 6 ermöglicht es Ihnen, dank des neu entwickelten Tabletthalters, die Beladung nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten, bei gleichzeitig gesteigerter Kapazität im Vergleich zu den bisherigen Modellen.

+20%



ONYX 6.

Sterilisationszyklen

Flexibilität ist grundlegend, um das Arbeiten zu optimieren und operative Effektivität zu schaffen. Die Onyx B-Autoklaven bieten eine breite Palette von Zyklen, die alle entwickelt wurden, um Ihnen jeden Tag 7 Sterilisationszyklen + 3 Testzyklen zu ermöglichen.




121° Standard	134° Standard	134° Flash	Test Helix	Test Bowie & Dick
134° Fast	134° Prion	134° Prion Fast	134° Safety	Test Vacuum

Nachverfolgung mit SD-Karte



Die Rückverfolgbarkeit ist durch die Speicherung der Daten auf einer SD-Karte und durch die Möglichkeit des Anschlusses eines Tecno-Print-Etikettendruckers und optischem Lesegeräts (zum Anschluss an den PC) gesichert.

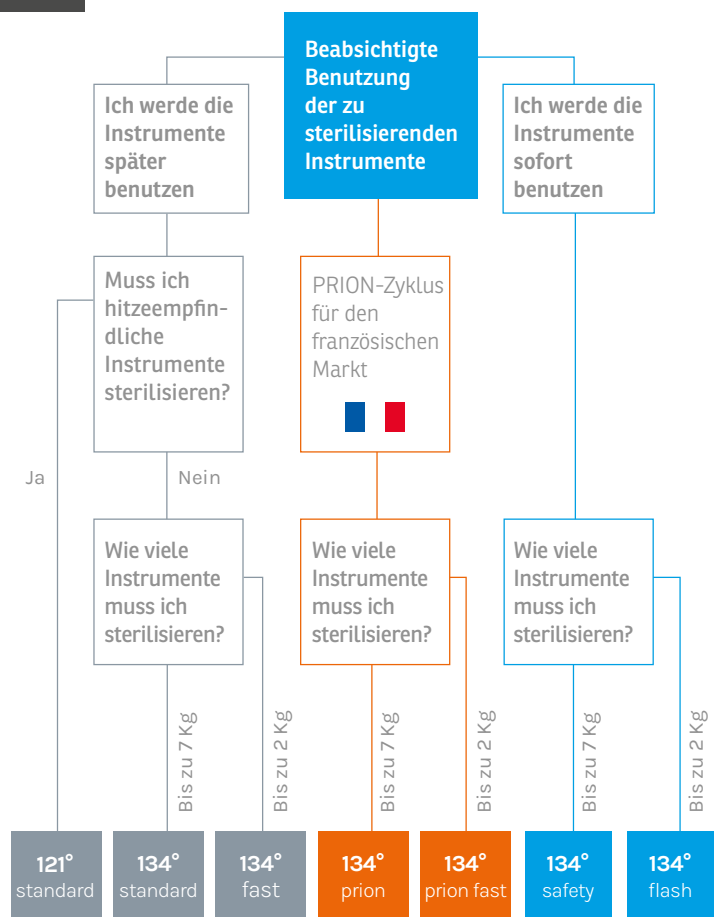

ONYX 6.

Wasserbefüllung

Beim ONYX 6 können Sie verschiedene Möglichkeiten der Wasserbeladung wählen. Es gibt einen Einlass an der Oberseite des Autoklaven und einen Einlass an der Vorderseite mit einem Saugsystem. Der ONYX 6 kann aber auch über das Pura Plus Osmosesystem an das Wassernetz angeschlossen werden.

Wasserbefüllung von oben

Die Wasserzufuhr kann manuell über den Tank auf der Oberseite des Autoklaven erfolgen.

new



Frontale Wasserbefüllung



Das Wasser kann über die Frontale Saugvorrichtung geladen werden.

Pura Plus Osmosesystem



Die Osmoseanlage Pura Plus, direkt an das Wassernetz angeschlossen, ermöglicht eine Betriebsdauer von ca. 800 Zyklen.

ONYX 6 und die Sterilisationszyklen

DE 
1^a Ausgabe

Seit rund 40 Jahren beschäftigt sich Tecno-Gaz mit der Konstruktion und Entwicklung von Geräten für den ambulanten Sterilisationsprozess und zeichnet sich seit jeher durch eine außergewöhnliche Innovationsfähigkeit und Qualität aus. Im Laufe der Jahre haben wir erfolgreich neue Systeme geschaffen, um den Prozess zu vereinfachen und Zeit, Kosten und Risiken zu reduzieren. Jetzt haben wir den ONYX 6 entwickelt, einen kompakten Autoklaven, der die neuen Anforderungen von Dental- und Gesundheitseinrichtungen erfüllt.



ONYX 6

BxHxT	474x497x640 mm
Gewicht	64 Kg
Stromversorgung	230 V - 50/60 HZ
Absorption	2,2 kW
Kammerdurchmesser	245 mm
Kammertiefe	430 mm



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia

Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tecno-Gaz S.p.A., alle Rechte vorbehalten. Die Bilder oder Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Tecno-Gaz S.p.A. haftet nicht für Schäden, die infolge von fehlenden oder ungenauen Angaben in dieser Unterlage entstehen. Die in dieser Unterlage verwendeten Bilder dienen nur als Beispiel.



Tecno-Gaz Spa.

www.tecnogaz.com



* M T G Z D 0 2 2 7 *