


Kyri Cart Evo

UNIDAD PORTAINSTRUMENTOS MÓVIL

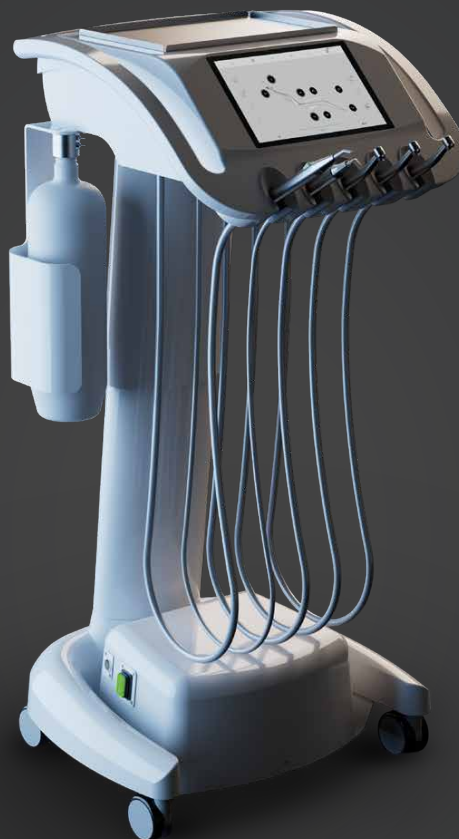

Máxima flexibilidad, conectividad total.

KYRI EVO Y KYRI CART EVO.

Integración total con el sillón Kyri Evo.

Simplifique su trabajo y ofrezca una experiencia más cómoda al paciente con una estación de tratamiento perfectamente conectada.

Líneas curvas y elegantes

nuevo diseño

dimensiones compactas,
ocupación reducida.

enfriamiento de instrumentos

refrigeración electrónica

con gestión mediante válvula proporcional
y visualización en tiempo real

KYRI EVO AND KYRI CART EVO. LA SOLUCIÓN INTEGRADA.

Se adapta a ti. Siempre.



protección metálica

nueva botella

con acoplamiento y carcasa protectora de metal para una mayor resistencia, seguridad y fiabilidad en el uso diario.



adaptación al perfil del usuario

altura variable de 83 a 103 cm

mejor ergonomía,
facilidad para aparcar

conectividad

wi-fi integrado

rendimiento inalámbrico superior para una conectividad estable e inmediata.

NUEVA INTERFAZ DE USUARIO


Interfaz intuitiva y estética.

Cada profesional puede adaptar el sistema a su propio estilo operativo: las relaciones de transmisión, la velocidad, el par y la pulverización son totalmente configurables en función de las necesidades específicas de cada procedimiento.

interfaz inteligente

nueva pantalla táctil a color de 9 pulgadas


Pantalla de alta resolución que mejora la visibilidad y el control.

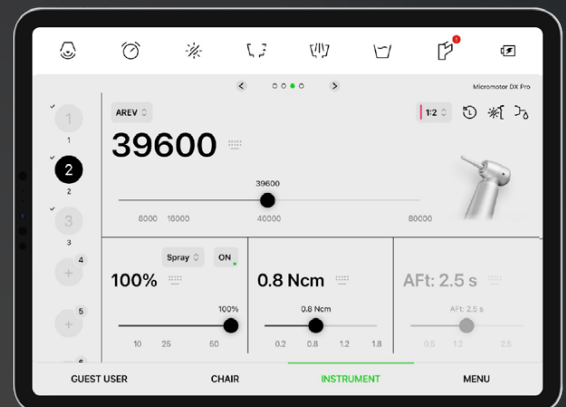

mayor versatilidad

perfiles de usuario ilimitados

Posibilidad de pasar fácilmente de un usuario a otro.

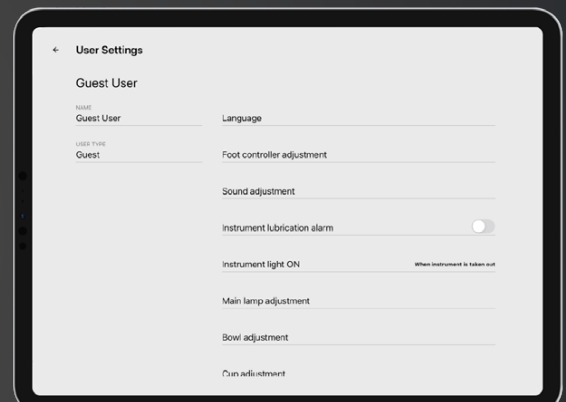


integración con Kyri Evo

pedal Smart Inalámbrico

Mejora tu ergonomía utilizando el funcionamiento manos libres. Inalámbrico o con cable. Pedal único Kyri Cart Evo / Kyri Evo.

** El pedal NOK está disponible.

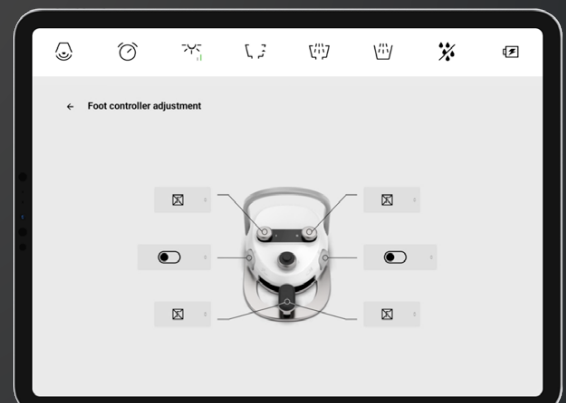

INTERCONEXIÓN

Máxima flexibilidad, conectividad total.

Opciones de conexión variables:

- Conexión directa al sillón Kyri Evo.
- Caja de conexión rápida.
- Posibilidad de conexión ambidiestra.



elevados estándares higiénicos

función higiene

Diseñado para optimizar y simplificar la limpieza de los tubos de los instrumentos.

slots adicionales


tres slot para micromotores

Acceso rápido a múltiples instrumentos. Posibilidad de añadir un micromotor quirúrgico. O bien combinar 2 micromotores y 1 micromotor quirúrgico.

máxima flexibilidad


movilidad operativa

Autónomo o conectado al sistema central, garantiza funciones avanzadas y máxima movilidad en cualquier entorno odontológico.

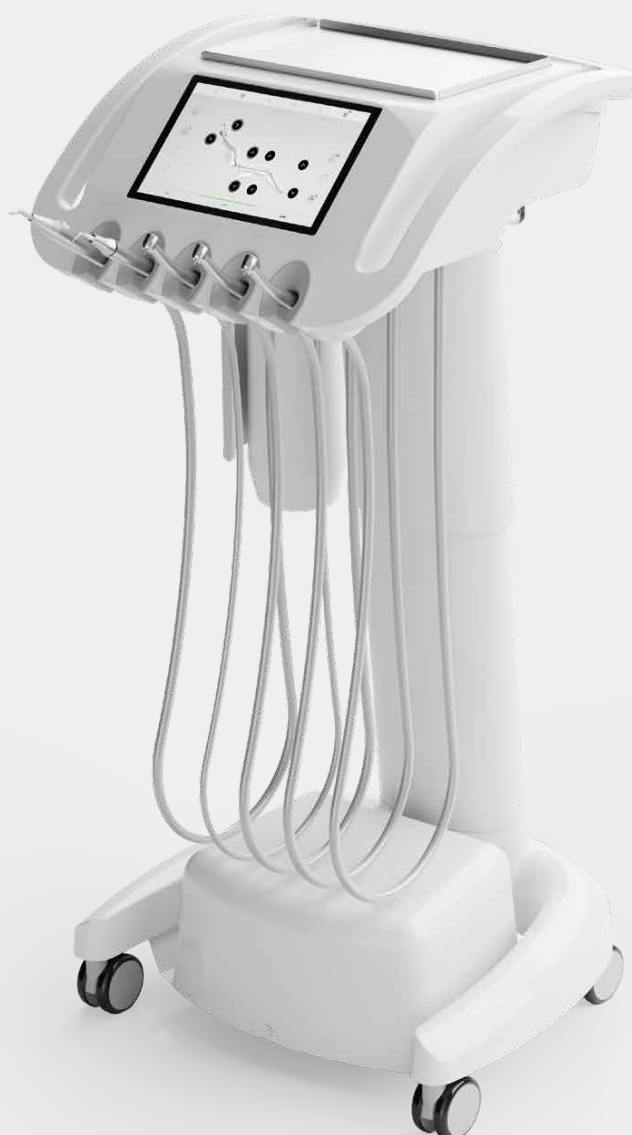


LA SOLUCIÓN VERSÁTIL

Infinitas posibilidades de configuración

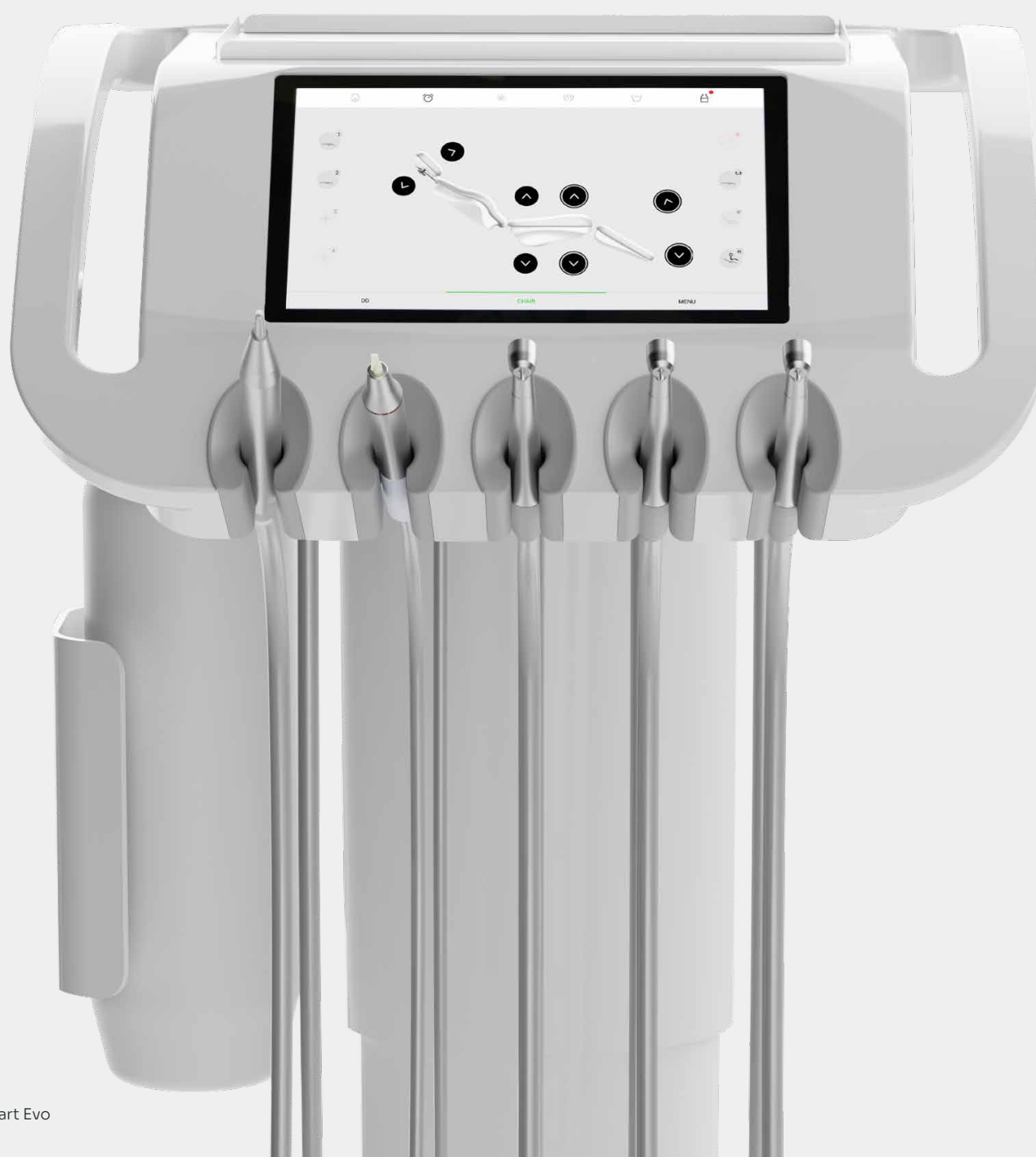


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kyri Cart Evo

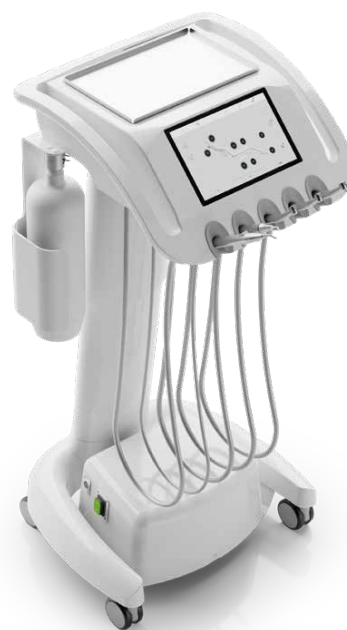

Altura mín./máx.	630 mm - 830 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Ingreso máximo	400 VA
Presión del aire de entrada	0.45-0.8 Mpa
Presión del agua de entrada	0.3-0.6 Mpa
Peso neto	43 kg (+ max 5kg.)
Ancho	500 mm
Profundidad	495 mm
Alimentación	220-240 V
Índice de protección contra descargas eléctricas	Clase de protección I
Índice de protección de la cobertura	IP21

Kyri Cart Evo

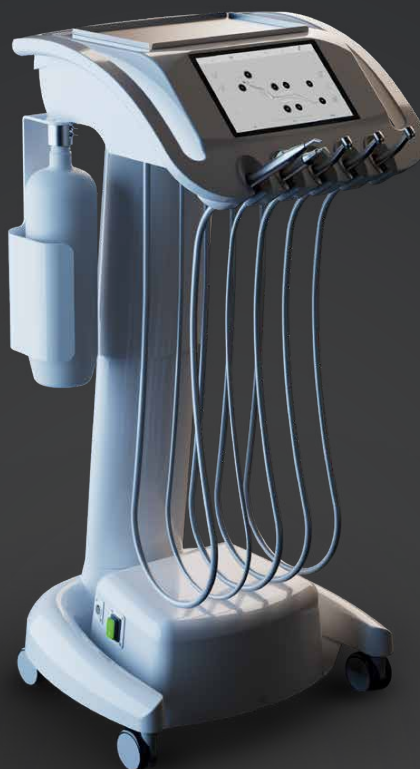

UNIDAD PORTAINSTRUMENTOS MÓVIL

Máxima flexibilidad, conectividad total.



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia
Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Todos los derechos reservados a Tecno-Gaz S.p.A. Se permite la modificación de imágenes o contenido si previo aviso.
Tecno-Gaz S.p.A. no se hace responsable de los daños originados por la falta de precisión de la información presente
en este documento. Las imágenes de este documento tienen un fin exclusivamente ilustrativo

