

TECNO-GAZ news

Organo di informazione aziendale realizzato da
Tecno-Gaz S.p.A. Per informazioni contattare
info@tecnogaz.com o accedere al sito www.tecnogaz.com

L'informazione tecnologica per il settore dentale.



focus on
EUROPA B EVO
CARATTERISTICHE ESCLUSIVE!



Settembre 2008 > Numero

10

Un mondo di novità da Tecno-Gaz

In questo numero...

p.2 Sterilizzazione

NOVITÀ

Autoclave per
carichi di tipo B
Europa B evo



p.4 Sistemi di sbiancamento

NOVITÀ

Sistema sbiancante **CLIP**

NEW DESIGN

Sistema sbiancante **PEARL**



p.6 Dispositivi di primo soccorso

Non normali
prodotti, ma
prodotti salvavita.



p.8 Potarifiuti elettronici

Tecnobasket, dai
prestigio al tuo studio.



p.9 Varie

B-Max, Medicanvas,
Shpera, Turboclean, Algimix

p.10 Artiglio-Italia

Imperdibile offerta!

Vi aspettiamo ad Expodental!

p.10 ASM 20 Plus

La fonditrice
per eccellenza.



p.12 Master flux

Sedazione cosciente

Tecno-Gaz vi invita a partecipare ad EXPODENTAL

MILANO 8-9-10 Ottobre 2008

PAD. 6 STAND A21- B16

Partecipare ad una evento espositivo come visitatore è sempre una esperienza importante, perché è una occasione unica per "avvicinarsi" e conoscere i produttori dei dispositivi che utilizzate giornalmente.

Un contatto che diventa opportunità, che permette di stabilire un rapporto relazionale utile a tutti per conoscerci meglio, avere informazioni e raccogliere commenti e suggerimenti. Partecipare ad EXPODENTAL vuol dire anche aiutare a sviluppare una manifestazione, che ha bisogno di tutti per potersi sviluppare e mantenere un ruolo importante nel panorama europeo ed

internazionale. Per concludere è giusto affrontare anche l'aspetto più economico, la fiera infatti resta comunque un momento di convenienza e trattativa commerciale che giova ad acquirenti e venditori, i quali per l'evento studiano solitamente condizioni speciali e offrono opportunità difficilmente ripetibili.

Come vedete tanti motivi per partecipare ad un evento che resta unico nel suo genere e che vede voi professionisti come protagonisti di una kermesse che anche per il 2008 si prospetta interessante e positiva.

UN'OPERA COMPLETA CHE AFFRONTA
LE TEMATICHE GIURIDICHE DELLA
RESPONSABILITÀ NEL LAVORO DEL
DENTISTA E DELLA SUA EQUIPE.

"Conoscere le norme giuridiche sulla responsabilità in odontoatria"

Quest'opera vuole raccogliere, tutte le più significative indicazioni ad uso e consumo dei medici e delle strutture sanitarie per affrontare il problema della sicurezza, e di riflesso della responsabilità che ne deriva. Grazie alla struttura e ai contenuti trattati questo libro può entrare a far parte del corredo di strumenti informativi che ogni studio deve mettere a disposizione dei propri collaboratori.



Vedi pag. 12

LA GRANDE CAPACITÀ DI QUESTE DUE
REALTÀ, IN GRADO DI CREARE NUOVE ED
INTERESSANTI OPPORTUNITÀ.

Al via la partnership Tecno-Gaz Artiglio

Due aziende primarie del settore dentale come Tecno-Gaz S.p.A. e Artiglio S.n.c., hanno deciso di fare un accordo di partnership commerciale, per meglio affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo ed esigente.

TECNO-GAZ
industries

artiglio - italia



Sterilizzazione

Europa B evo

L'unica autoclave al mondo con sistema integrato per il controllo dell'incubatore biologico



**Continuità
nell'eccellenza**

EUROPA B evo è la continuità di un successo che si ripete da anni, questo grazie alla capacità di rinnovare periodicamente il prodotto, mantenendo però immutato lo straordinario grado di affidabilità ed una eccellenza tecnica raggiunta nel tempo.

Prezzo Offerta

Euro **3.400**^{+I.V.A.}_{,00}

Optional per Europa B evo



Incubatore biologico b test
Incubatore biologico a tre fiale, da connettere direttamente su Europa B Evo



Deionizzatore mod. Pura

- Deionizzatore completo di controllo e connessione autoclave.
- Il filtro a cartuccia ha una durata di circa 800 cicli. Un apparecchio che aiuta a risparmiare tempo nella normale operatività giornaliera ed assicura un risparmio sul costo dell'acqua distillata.

Optional per Europa B Evo; di serie nella versione Europa Evo 24.



Software per connessione a computer

- Software dedicato per l'acquisizione dei dati e la loro gestione informatica.



Memory card completa di software


- Memory Card di semplice connessione per l'acquisizione dei dati relativi ai cicli eseguiti.
- Possibilità di registrazione di circa 90 cicli.
- Software che permette di scaricare i cicli memorizzati dalla Memory Card su PC.



Speciale portatray bivalente

- Speciale portatray studiato per sostenere n. 4 trays standard aperti e n. 3 trays con coperchio.

È arrivato il momento di acquistare una autoclave per carichi di tipo B: **Europa B evo**

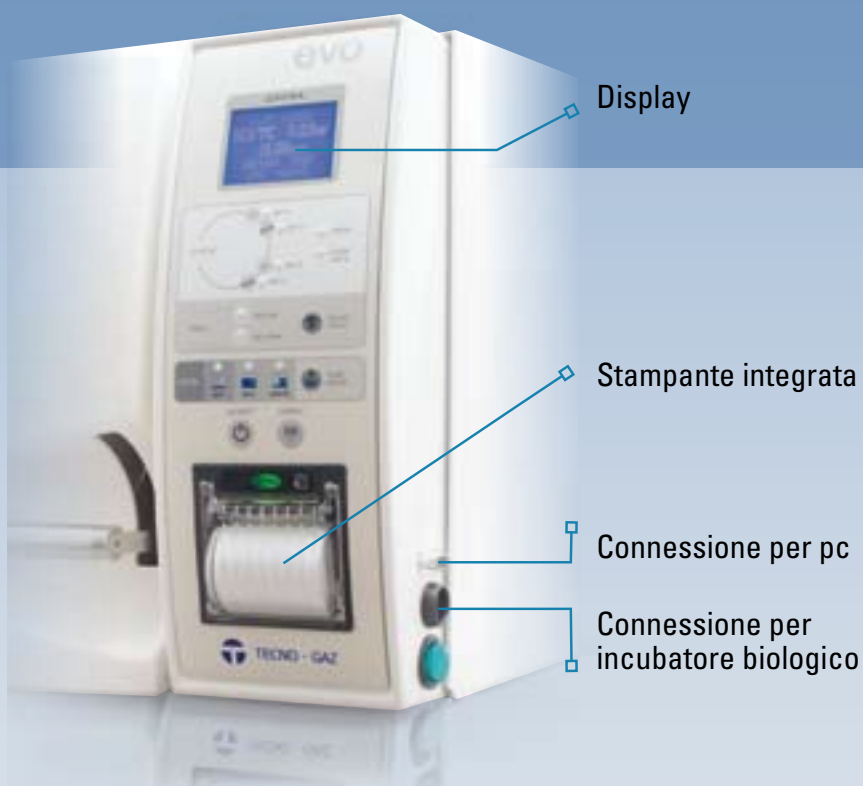

EUROPA B Evo oltre a un look più moderno si è arricchita del sistema di connessione per la gestione dell'incubatore biologico, una soluzione UNICA AL MONDO, che rende questa autoclave ancor più performante ed "autorevole".

UN ALTRO ULTERIORE ED IMPORTANTE MOTIVO PER SCEGLIERE EUROPA B evo

Coupon Omaggio

Per coloro che acquisteranno una **autoclave mod. Europa b evo**, utilizzando questo coupon avranno in omaggio un sistema di distillazione acqua mod. **Distiller** oppure l'incubatore biologico **B TEST**.

DISTILLER
sistema di distillazione



B TEST
incubatore biologico



Offerta valida fino al 15.10.08

I prodotti del ciclo di sterilizzazione Tecno-Gaz

Detersione: Artica



Serve ad abbattere la carica batterica portandola a livello di sicurezza, tutelando l'incolumità degli operatori.

Disinfezione: Astra



Per rimuovere dagli strumenti o materiali ogni tipo di residuo chimico o biologico.

Asciugatura: Unika



Asciugare gli strumenti per evitare che si possano alterare, macchiare e corrodere. Se lo strumento non è asciutto il processo di sterilizzazione può essere seriamente compromesso.

Imbustamento: Dea



Mantenere nel tempo gli strumenti sterilizzati.

Tracciabilità: Traccia



Tracciare gli strumenti, per assicurare tutela giuridica al professionista in caso di contenzioso.

Sterilizzazione: Europa B evo



Eliminare ogni forma microbica o contaminante presente sugli strumenti o sui manufatti utilizzati nella pratica quotidiana in ogni studio.



Sistemi di sbiancamento professionale

Sistema sbiancante

CLIP

**novità!!!
prestazioni e
praticità**

**GRANDI RISULTATI ED AMMORTAMENTO
IN UN SOL GIORNO**

Abbiamo realizzato un modello di lampada sbiancante, alla portata di tutti, studiata anche per coloro che applicano saltuariamente questi trattamenti.

Abbiamo realizzato un prodotto semplice, trasportabile, che assicura un risultato eccellente, ad un prezzo imbattibile. La lampada viene fornita con un kit prodotti che assicura circa 10 trattamenti e con soli 3-4 trattamenti potrete recuperare l'intero costo dell'investimento!!!

La lampada è semplice e pratica, costituita da:

- Corpo irradiante nel quale sono posizionati i led, i quali vengono costantemente controllati e raffreddati, onde evitare trasmissioni di caldo sulla parte trattata.
- Sotto alla testata vi è un interruttore generale, che serve per accensione/spegnimento dell'apparecchiatura e per attivazione e blocco del trattamento.
- L'attivazione genera uno step temporizzato, dalla durata di 10 minuti, con spegnimento automatico.

- Comodo braccio flessibile che permette il giusto posizionamento del corpo irradiante, rispetto alla bocca del paziente.
- Morsetto meccanico per il fissaggio della lampada.
- Alimentatore con controllo elettronico, predisposto per essere fissato a parete o appoggiato a pavimento.
- Cavo di alimentazione.

Il tutto è contenuto in una pratica valigia plastica, utile per il trasporto del dispositivo fra uno studio e l'altro.



UN PRODOTTO
STRAORDINARIO,
AD "ALTO VALORE
AGGIUNTO", CHE
VI AIUTA AD
AUMENTARE
SODDISFAZIONE E
FIDELIZZAZIONE
DEL CLIENTE

Prezzo Offerta

Lampada mod. CLIP **completa di 10 trattamenti**

Euro **800**^{+I.V.A.}_{,00}

Lampada 400 € +
Kit Prodotti 400 €

Desens

Kit desensibilizzante
Nitrato di potassio



Basickit

n° 4 BGEL (2,5 ml)
n°2 LIQUIDMASK (3 cc)



Apribocca



Occhiali protettivi



**denti
bianchi in
20 minuti**

**rapporto
prezzo-qualità
imbattibile**

Sistema sbiancante

PEARL

Coupon Omaggio

Per l'ordinativo ritagliate il coupon e riceverete un **Basikit: 10 trattamenti (perossido+diga)**



Offerta valida fino al 15.10.08

**L'ECCELLENZA TECNICA E DESIGN ESCLUSIVO
PER UN PRODOTTO MADE IN ITALY
RISULTATO GARANTITO E NUOVO SISTEMA DELLA GESTIONE
DELLO SBIANCAMENTO AMBULATORIALE**

PEARL è l'eccellenza dei dispositivi di sbiancamento professionale, studiata con un sistema di controllo che permette una corretta gestione delle procedure di sbiancamento.

- **Linea moderna ed innovativa, soluzioni che creano forte immagine ed impatto visivo.**
- **Risultati certi in soli 20 minuti**
- **Nessun riscaldamento della zona trattata**
- **Ipersensibilità ridotta o annullata**

Tecno Gaz ha realizzato Pearl un nuovo ed evoluto dispositivo, massima espressione dei sistemi sbiancanti oggi in commercio.

Pearl utilizza una lunghezza d'onda tra i 480 e 520 nm, la lampada ha uno speciale schermo che permette l'assorbimento della luce ultravioletta ed infrarossa evitando il riscaldamento della polpa e delle mucose. La luce è controllata e convogliata da uno speciale schermo che assicura un concentramento dei raggi, permettendo massima resa dell'apparecchio e riduzione dei tempi di trattamento. **L'apparecchiatura**

dispone della funzione di polimerizzazione rapida da utilizzarsi sulla diga liquida protettiva. La macchina dispone di un controllo elettronico che gestisce i tempi di trattamento, pause, attivazione. Un ampio display a cristalli liquidi permette di poter monitorare tutte le funzioni dell'apparecchiatura e di poter visualizzare ogni funzione. Pearl è stata realizzata in modo da occupare pochissimo spazio, il pianale è solido, stabile ed equilibrato, munito di ruote è facilmente spostabile. La lampada dispone di un sistema a rotazione completa che permette di poterla posizionare a piacimento.



Programmi operativi

Programma polimerizzazione

Prezzo Offerta | Lampada mod. PEARL **completa di 10 trattamenti**

Euro **1.490**^{+I.V.A.}_{,00}

Lampada Pearl +
Kit Prodotti Sbiancamento





Dispositivi di primo soccorso

Intervenire rapidamente


Secondo l'Associazione Cardiaca Americana (AHA, American Heart Association) e il Consiglio di Rianimazione Europeo (ERC, European Resuscitation Council), una vittima di arresto cardiaco improvviso (SCA) ha bisogno della defibrillazione per interrompere la fibrillazione ventricolare (VF), un'anomalia cardiaca spesso letale. Prima si interviene con la defibrillazione, maggiori sono le possibilità che la vittima ha di sopravvivere. Ecco perché avere un defibrillatore da utilizzare in attesa dell'assistenza medica è di fondamentale importanza.

L'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE E DI DISPOSITIVI PER IL PRIMO SOCCORSO È UN MOMENTO MOLTO DELICATO ED IMPORTANTE, IN QUANTO NON SI STA ACQUISTANDO UN SEMPLICE DISPOSITIVO MEDICO, MA BENSÌ UN COMPLESSI STRUMENTO SALVAVITA.

Troppo spesso questi prodotti vengono proposti da agenti o venditori non preparati, i quali illustrano il prodotto in modo superficiale, approssimativo, banale, parlando semplicemente della facilità d'uso e troppo spesso l'acquirente si avvicina a questo prodotto senza avere basi cognitive adeguate. L'investimento per un buon defibrillatore non è elevato, anzi considerando che può salvare vite umane è un dispositivo a bassissimo costo, ma l'acquirente non deve valutare solo il costo, anzi deve approfondire e valutare gli aspetti legati alla sicurezza, attraverso una valutazione del produttore, delle caratteristiche tecniche e tecnologiche del prodotto. I dispositivi salvavita, partendo dai sistemi diagnostici sino ad arrivare a quelli operativi, sono tutti importanti in quanto garantiscono la gestione delle emergenze e aumentano le possibilità di salvare vite umane.

Il tempo è il fattore critico

Molti studi hanno dimostrato l'importanza del tempo che separa il momento del collasso dalla defibrillazione e gli effetti della rianimazione cardiopolmonare (CPR) eseguita dai presenti relativamente alla sopravvivenza di una persona vittima di fibrillazione ventricolare. Ogni minuto che separa il collasso dalla defibrillazione fa diminuire dal 7 al 100% le possibilità di sopravvivenza per le vittime di arresto cardiaco e fibrillazione ventricolare se non viene eseguita una rianimazione cardiopolmonare. Raramente la fibrillazione ventricolare si normalizza in modo autonomo. È fondamentale l'intervento di un defibrillatore che consente di salvare la vita. Accertatevi di averne uno a disposizione quando vi serve.

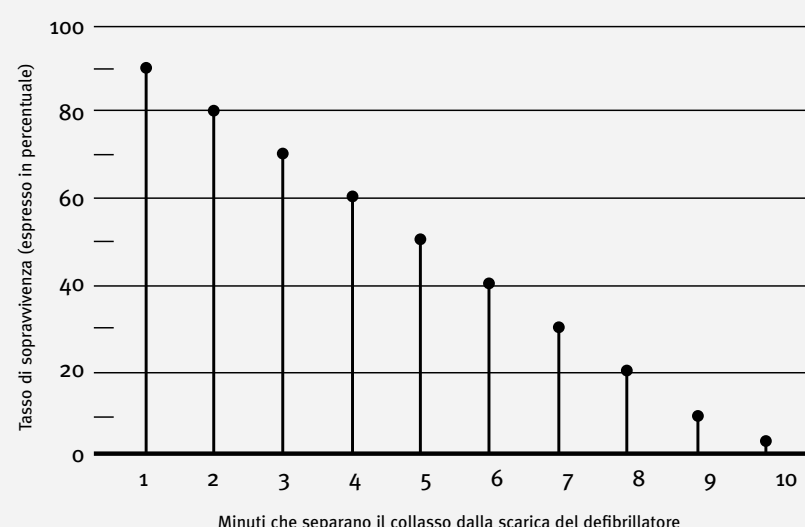

QUESTI NON SONO PRODOTTI "NORMALI", MA **DISPOSITIVI SALVAVITA**

Pulsiossimetro

VITAL TEST

Vital test è il nuovo pulsiossimetro di Tecno-Gaz, un prodotto di ultima generazione che si distingue per solidità, precisione, caratteristiche evolute.

Vital Test ha dimensioni ridotte, facilmente trasportabile, dotato di borsa e tracolla, facilmente utilizzabile da personale medico ed ausiliario. Il prodotto è semplice e professionale, utilizzabile in terapia intensiva, reparti, studi medici, odontoiatri, emergenza, permette un monitoraggio immediato, preciso,

non invasivo. Vital Test ha una forma piacevole ed ergonomica, facile da impugnare e trasportare, il display è ampio e i comandi semplici ed intuitivi. Vital Test permette di rilevare il valore di SpO₂, la frequenza cardiaca (PR pulse rate), la visualizzazione della forma d'onda e il valore trend degli ultimi 10 minuti di questi 2 parametri. L'alimentazione è con batteria ricaricabile che ne consente l'uso in qualsiasi condizione e luogo.



Prezzo Offerta

Supporto per fissaggio a riunito
GRATUITO!

Euro **345**^{+I.V.A.},00

Set rianimazione **AIR OX**

ADOPTARE DISPOSITIVI
DI PRIMO SOCCORSO
VUOL DIRE TUTELARE I
PROPRI PAZIENTI.

Un set con bombola di ossigeno è un dispositivo indispensabile in quanto l'ossigeno è il substrato base per far sopravvivere le cellule. Una bombola a bassa pressione o di contenute dimensioni è un dispositivo assolutamente inadeguato. La bombola deve garantire l'erogazione di almeno 15 litri al minuto, per un ora. La bombola deve avere minimo una capienza di 5 litri liquidi (1.000 litri gassosi).

Prezzo Offerta

Euro **490**^{+I.V.A.},00



Defibrillatori automatici e semiautomatici **TECNOHEART**

La linea defibrillatori si compone di 2 modelli:

- TecnoHeart S (semiautomatico)
- TecnoHeart A (automatico)

Il sistema semiautomatico TecnoHeart S:

I defibrillatori DAE oggi in commercio, sono prevalentemente semiautomatici, pertanto vengono pilotati da comandi vocali e l'attivazione delle scariche avviene con comando manuale azionato dall'operatore. Una azione semplice e guidata.

Il sistema automatico TecnoHeart A:

La massima espressione di duttilità sono i defibrillatori DAE automatici. Questi modelli gestiscono tutte le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle attività che il dispositivo esegue. Anche l'azionamento delle scariche avviene in modo autonomo, previo avviso verbale, senza intervento dell'operatore. Questo evita ritardi, esitazioni ed ogni attività esclude il coinvolgimento umano.



◀ Defibrillatore
TecnoHeart AED A
Art. 930304



▶ Defibrillatore
TecnoHeart AED S
Art. 930302



Caratteristiche esclusive

Batteria

Con sistema di controllo carica sul desk del defibrillatore. La batteria è stata realizzata per la durata di ben 290 shock + 10 ulteriori shock di riserva finale.

Piastre

Le piastre del TecnoHeart sono costantemente collegate al defibrillatore stesso, questo permette un monitoraggio costante.

Software

Le piastre del TecnoHeart sono costantemente collegate al defibrillatore stesso, avrete così un controllo della loro presenza ed efficienza, evitando non funzionamenti e mancanze.

Schermo display multifunzione

Oltre alla voce, le istruzioni scorrono per iscritto sullo schermo. Una opzione determinata per salvare la vita di una persona.

Aumento di energia variabile

Il nostro dispositivo DAE determina l'impedenza elettrica (livello di resistenza) di ciascun paziente al fine di regolare il livello di energia erogato.

Riconoscimento defibrillatore

Uno speciale sistema rileva la presenza di PACEMAKER, escludendolo nella fase di monitoraggio e scarica.

Rescue ready

La nostra tecnologia brevettata Rescue Ready ci fa distinguere dagli altri.

Garanzia

La garanzia è di 7 anni sul dispositivo e di 4 anni sulla batteria.

Prezzo Offerta

Euro **1.790**^{+I.V.A.},00

Il libro "Emergenze mediche in ambito odontoiatrico" del Dott. Pietro Marini.

OMAGGIO!

(prezzo di copertina 69 euro)





Il portarifiuto ad apertura elettronica

Tecnobasket



Ogni dettaglio della Vostra struttura, deve avere un valore legato alla immagine, al servizio all'efficienza, anche un aspetto poco valutato come il portarifiuto può dare valore al vostro "insieme".

Tecno Basket è un portarifiuti tecnologico con sistema ad infrarosso gestito a microprocessore, che può garantire valore aggiunto e servizio al Vostro studio.

La linea portarifiuti Tecno Basket è stata realizzata per dare servizio ed immagine. Il sistema di apertura automatica con controllo ad infrarosso assicura grandi benefici:

1 Non dovete più toccare con le mani ante, leve o coperchi, assicurando massima igiene e nessuna possibilità di contaminazione;

2 Non dovete utilizzare pedali che possono essere scomodi o ingombranti;

3 Costruito in acciaio inox, che assicura una lunghissima durata e una ottima immagine;

4 Integrabile ed adattabile in tutti gli ambienti;

5 Le diverse misure permettono l'adozione in tutti gli ambienti, secondo esigenza;

6 Il sistema di apertura si aziona anche a mani piene con un semplice accostamento;

7 I rifiuti non sono visibili.

▲ Anche a mani piene **basta avvicinarsi** per azionare l'apertura.



Art. 95042L
Tecno Basket 42 litri

Art. 95065L
Tecno Basket 65 litri

Art. 95032L
Tecno Basket 32 litri

Art. 95008L
Tecno Basket 8 litri

Art. 95024L
Tecno Basket 24 litri

Tecno basket		
Modello		Prezzo
Art. 95008L	Portarifiuti modello 8 lt in plastica colore bianco	59,00
Art. 95024L	Portarifiuti modello 24 lt acciaio satinato	135,00
Art. 95032L	vv	147,00
Art. 95042L	Portarifiuti modello 42 lt acciaio satinato	160,00
Art. 95065L	Portarifiuti modello 65 lt acciaio inox	355,00

Lampada ploimerizzante

B-MAX

Prezzo Offerta

Euro **650**^{+I.V.A.}_{,00}



B-Max è una lampada polimerizzante a tecnologia LED, leggera, maneggevole, cordless, utilizzabile in modo semplice. B-Max adotta la nuova tecnologia a LED, assicurando un'elevata emissione di luce con spettro di 450/480nm, focalizzata, fredda a bassa immissione di infrarossi. B-Max garantisce un'emissione di luce con potenza pari a 1600mW

Negativoscopi MediCanvas con tecnologia TFT-LCD

I negativoscopi MediCanvas Tecno-Gaz, utilizzano la tecnologia TFT-LCD, e sono la massima espressione qualitativa, estetica e tecnologica. Un prodotto di prestigio, che migliora la vostra operatività, crea un valore aggiunto al vostro studio e assicura un impatto estetico notevole.

Questi negativoscopi sono muniti di dispositivo di accensione e spegnimento automatico FAS ad inserimento della lastra radiologica.



Art. **7072-N**

Negativoscopi

LED

Prezzo Offerta

Euro **345**^{+I.V.A.}_{,00}

Riscaldamento dei liquidi

SPHERA

Prezzo Offerta

Euro **280**^{+I.V.A.}_{,00}



Il riscaldamento di anestetici e soluzioni irriganti migliora la cura ed il comfort del paziente, riducendo dolori e sensazioni sgradevoli. Tecno-Gaz ha realizzato SPHERA un dispositivo a doppia temperatura, controllata elettronicamente con microprocessore e segnalazioni visive.

SPHERA è dotato di doppio riscaldamento:

- 37°C per composti
- 55°C per soluzioni irriganti o anestetici

Il composito trattato termicamente risulta essere più plasmabile e migliora le performance di foto polimerizzazione. SPHERA è realizzato con 4 alloggiamenti per siringhe, 1 alloggiamento per composti, 2 alloggiamenti per tips.

Il trattamento e la manutenzione di manipoli e turbine è determinante per assicurare una corretta sterilizzazione e un mantenimento efficiente degli strumenti rotanti. TURBO CLEAN è un dispositivo che permette un trattamento automatizzato, della pulizia e della lubrificazione contemporanea di 2 turbine e di 1 contrangolo o manipolo. Ogni postazione di trattamento è gestita da un apposito comando posto sulla plancia, che permette di poter scegliere 3 tipi di trattamento:

- standard
- prolungato
- intensivo



Trattamento e manutenzione manipoli e turbine

TURBO CLEAN

Prezzo Offerta

Euro **1.150**^{+I.V.A.}_{,00}

Miscelatore per alginati

ALGIMIX

Prezzo Offerta

Euro **670**^{+I.V.A.}_{,00}



Tecno-Gaz presenta il nuovo sistema ALGIMIX un nuovo ed esclusivo dispositivo ideale ed indispensabile per ogni studio odontoiatrico.


ALGIMIX assicura molti vantaggi:

- ripetitività costante del risultato, eliminando ogni componente umana
- processo semplice e pulito
- aumenterete la qualità del processo
- risparmiate tempo
- riducete gli sprechi di alginato

ALGIMIX è:

- semplicissimo
- silenzioso
- programmabile per ogni alginato
- ricco di accessori

OGGI IL TUO VECCHIO FRESATORE VALE TANTO

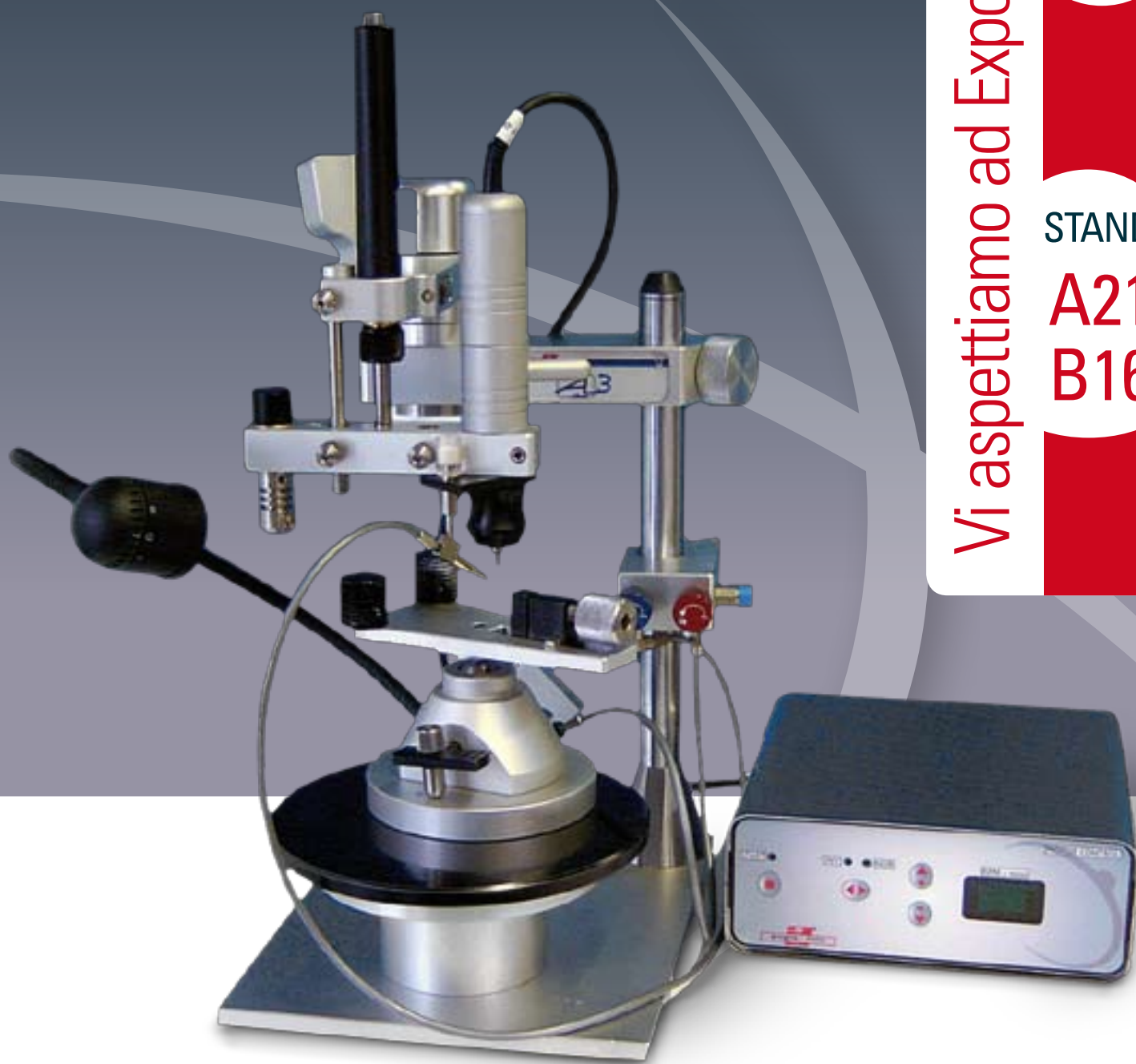

Vi aspettiamo ad Expodental

PAD.
6

STAND
A21
B16

SOLO PER VOI **IN OMAGGIO**
UN CALIBRO DIGITALE



Promozione
valida per tutti gli
odontotecnici che
concluderanno
ordini in fiera a
Milano di importo
minimo di 400 euro.

IL TUO VECCHIO
FRESATORE VALE
1.125,00

Prezzo Offerta

A3 IRON è tuo a SOLI

Euro **2.990**^{+I.V.A.},00

Attacchi dentali

Attacchi SWIFT-ART

Attacchi in estensione a guida parallela, completamente in plastica, costituiti da due componenti:

- patrice(PX) calcinabile a guida trapezia arrotondata, a 90° (versione CORTO) e 125°(versione SUPERMICRO)
- matrice (MX), intercambiabile a ritenzione differenziata



Attacchi SKATE

Attacchi a pattino, completamente in plastica, costituiti da una sola componente:

- patrice(PX) da introdurre nella parte mobile in un alloggiamento ricavato mediante duplicazione



Attacchi tradizionali

Art

Precisione ★★★★★
Stabilità ★★★★★
Frizione ★★★★★



Rec

Precisione ★★★★★
Stabilità ★★★★★
Frizione ★★★★★




Ter

Precisione ★★★★★
Stabilità ★★★★★
Frizione ★★★★★



Versione DUPLI

Per tutte le serie ART, REC e TER è disponibile anche la versione DUPLI caratterizzata dalla posizione verticale del perno di ritenzione e dalla forma della guaina.

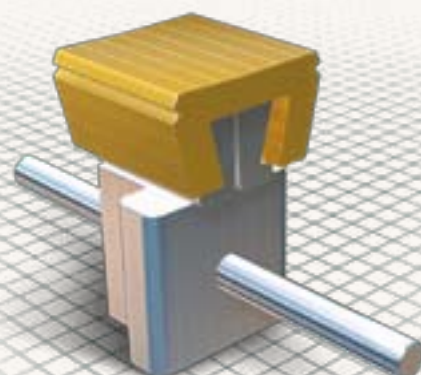

www.artiglio-italia.it



La fonditrice per eccellenza

TECNO-GAZ news
L'informazione tecnologica per il settore dentale.

Settembre 2008 | Pagina 11

Fonditrice a pressofusione

ASM20plus

OMAGGIO!

Mobile di
supporto



Prezzo Offerta

Fonditrice ASM20
con pompa del
vuoto e stampante
TUA A SOLI

Euro **7.600**^{+I.V.A.}_{,00}

Prezzo ufficiale non
scontabile. Valido su
tutto il territorio.

**GARANZIA DEL
CORPO RISCALDANTE
ESTESA A 3 ANNI**



UN CUORE NUOVO PER LA FONDITRICE LEADER

3 anni di ricerca e di test presso i principali
laboratori tedeschi, ci hanno permesso di
realizzare un nuovo corpo riscaldante ad

altissima resistenza. Lunghissima durata anche in
caso di continue fusioni di metalli vili, resistenza
alle sinterizzazioni dei crogioli, lunga durata.





Master Flux

Master Flux Automatic AS 3000

Apparecchio per sedazione con controllo flussi automatico. Master Flux Automatic AS 3000 è l'unica apparecchiatura per sedazione interamente studiata e realizzata in Italia. Tutti i particolari sono prodotti dalla Tecno-Gaz e subiscono uno scrupoloso controllo individuale. Per evitare al paziente un negativo impatto visivo e psicologico è stato adottato un elegante mobile che può contenere le bombole di ossigeno e

protossido d'azoto con relativi riduttori ed attacchi. Il mobile è color RAL 9002, munito di ruote, piano laminato portastrumenti ed all'interno vi è un vano studiato per bombole da lt.5 e lt. 10. Frontalmente vi è l'alloggiamento per la scatola flussometrica completa di accessori.

Il MASTER FLUX ha superato i tests di stabilità richiesti dalle norma EN 60204.



Prezzo Offerta

Euro **3.200**^{+I.V.A.},00



Edizioni da non perdere

“Conoscere le norme giuridiche sulla responsabilità in odontoiatria”

A CURA DELL' AVV. PIETRO PETTENATI

“Questo libro è il risultato di alcuni anni di attività professionale durante i quali ho approfondito numerose tematiche inerenti gli studi odontoiatrici. Ho cercato di usare una terminologia a-tecnica e di non addentrarmi in digressioni giuridiche spesso incomprensibili a chi non opera nel campo del diritto. Il mio obiettivo è sempre stato quello di fornire agli odontoiatri uno strumento di facile consultazione in grado di fornire informazioni utili alla gestione del loro studio. Spero di esserci riuscito. Mi preme infine ringraziare chi ha creduto nelle mie capacità professionali consentendomi di approfondire tematiche, come per esempio quelle inerenti la sicurezza, che mi hanno particolarmente appassionato. Tra questi, un particolare ringraziamento lo devo al presidente di Tecno-Gaz S.p.A. Sig. Paolo Bertozzi.”

Prezzo di copertina: 49 Euro*

* Potete richiedere le pubblicazioni direttamente a: Tecno-Gaz S.p.A.



“L'emergenza medica nello studio odontoiatrico”

A CURA DEL DOTT. PIETRO MARINI

Questo libro è stato scritto facendo riferimento ai protocolli *Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care*, opportunamente adattati alla realtà della pratica odontoiatrica secondo l'esperienza dell'autore.

Nella prima parte sono indicati gli schemi operativi a sette possibili presentazioni cliniche dell'emergenza:

1. la perdita delle funzioni vitali
2. le alterazioni dello stato di coscienza
3. le convulsioni
4. le alterazioni del respiro
5. i rialzi dei valori pressori
6. la comparsa di un dolore toracico acuto
7. la comparsa di un dolore neurologico acuto

Prezzo di copertina: 69 Euro*

* Potete richiedere le pubblicazioni direttamente a: Tecno-Gaz S.p.A.



* D P O 3 2 0 0 *

Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391
info@tecnogaz.com

Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno-Gaz S.p.A. non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

TECNO-GAZ
i n d u s t r i e s